


Access without Vitrectomy!

製品名 : Nano SubRet Gateway

品 番 : VS0225

入 数 : 5本/1箱 (滅菌済み)

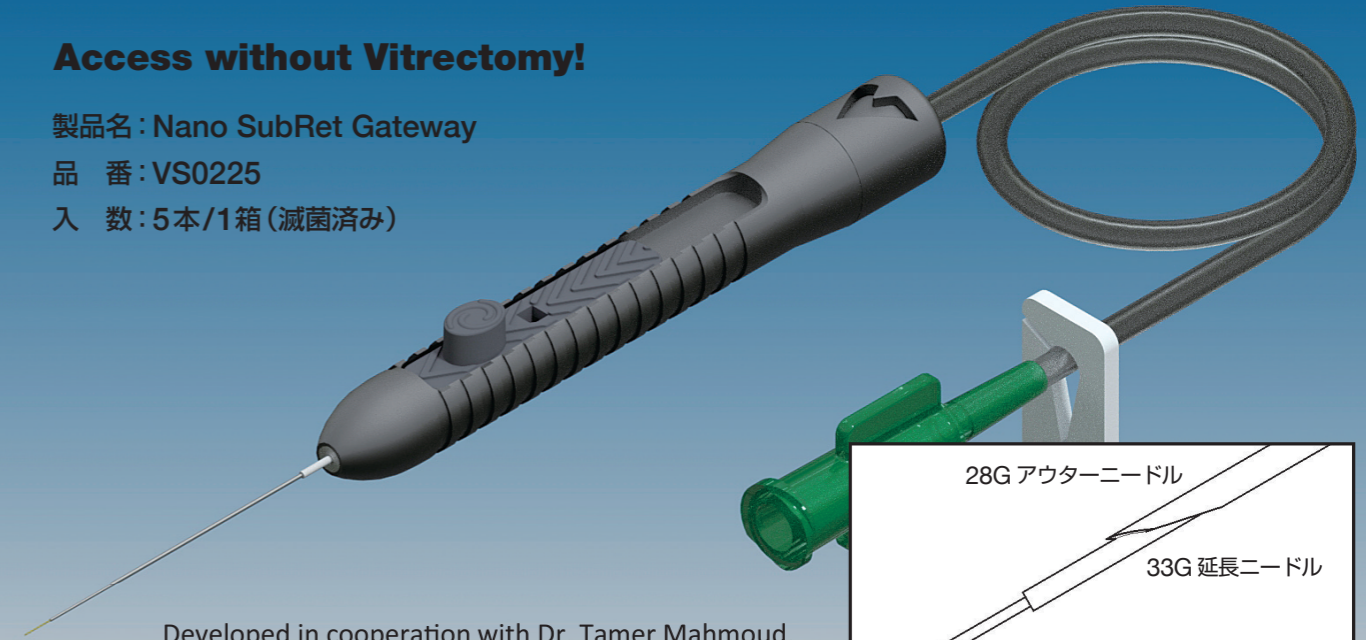

Developed in cooperation with Dr. Tamer Mahmoud,
Dr. Prethy Rao and Dr. Edward Wood

特徴：

- * ハンドル操作によって、42G カニューレと 33G 延長ニードルは 28G ニードル内へ収納できます。
- * 硝子体手術なしで網膜下腔へのアクセスが可能です。
- * 硝子手術用パックを使用する必要はありません。
- * 28G のアウターニードルは強膜挿入をスムーズにさせます。
- * 33G の延長ニードルは眼内での剛性をより高めます。
- * 42G のポリイミドカニューレは網膜下腔での操作を容易にします。
- * 硝子体腔に逆流しません。

使用映像



使用目的：

- 黄斑下出血
- 遺伝子治療
- 網膜下注射

販売名 : Vortex シングルユース網膜硝子体用カニューレ
認証番号 : 302AKBZX00036000

- 製造元 : Vortex Surgical (USA)
- 製造販売元 : 株式会社ホワイトメディカル
東京都荒川区東日暮里 5-48-2

トドリッチ氏 イルミネータ ディプレッサー

Developed in collaboration with Bozho Todorich, M.D., Ph.D.

Market's ONLY One-piece, Complete illuminated Depressor

90°のサイド イルミネーション




アクリル製ボール型の先端



機器へ直接接続可能

使用中の写真

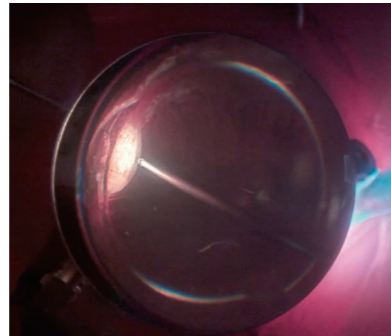

強膜圧迫 with イルミネータ

POINT!

術者自らで(サポートなしで)、強膜圧迫と照明操作を同時に行うことが可能です。
術者自身で術中に両方をコントロールできることが利点です。

- * ボール型の先端で強膜を圧迫しながら網膜基部に照明を同時に照らすことが可能な唯一のイルミネータです。
- * 混濁、出血、増殖膜などの除去吸引の際の照明として非常に効果的です。
- * 眼内の照明 (シャンデリア) は不要の為、コスト削減が可能です。

◀ 手術動画



品番 : VS0801A (Alcon タイプ)
入数 : 5本 / 1箱 (滅菌済み・単回使用)
販売名 : トドリッチ氏イルミネータ ディプレッサー

シングルユース硝子体手術用鉗子 25G/27G



シャフト長（先端含む）
25G: 30mm / 25G ロング:35mm
27G:27mm / 27G ロング:32mm


ILM 鉗子



(使用動画)


25G VS0744.25
25G VS0744.25-35
(ロングシャフト 35mm)
27G VS0744.27
27G VS0744.27-35
(ロングシャフト 32mm)

Adaptive 鉗子

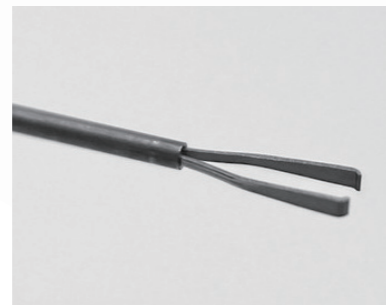


25G VS0740.25

エンドグリップ鉗子

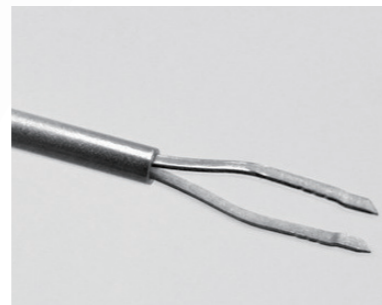

25G VS0743.25
25G VS0743.25-35
(ロングシャフト 35mm)

PRO グリップ鉗子

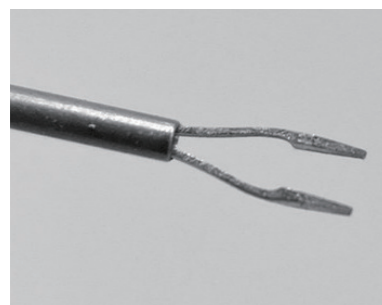

25G VS0713.25
25G VS0713.25-35
(ロングシャフト 35mm)
27G VS0713.27
27G VS0713.27-35
(ロングシャフト 32mm)

テワリ氏 T2 鉗子



(使用動画)

25G VS0742.25
25G VS0742.25-35
(ロングシャフト 35mm)



エイシメトリカル鉗子



25G VS0745.25

数量：1箱 5本入り
販売名：Vortex ACTU8 ディスポーザブル フォーセプス
認証番号：231AKBZX00027000

シングルユース バックフラッシュハンドピース 25G/27G

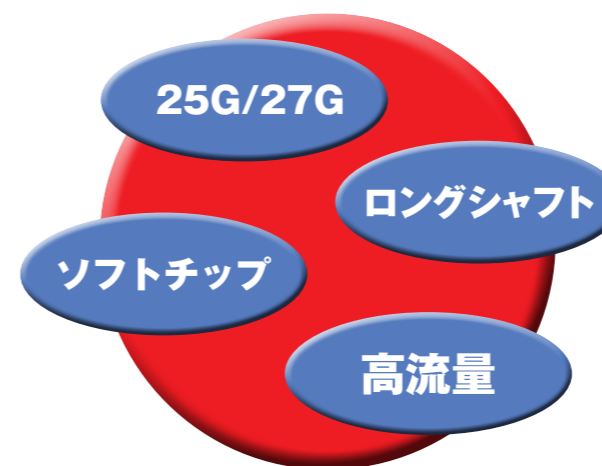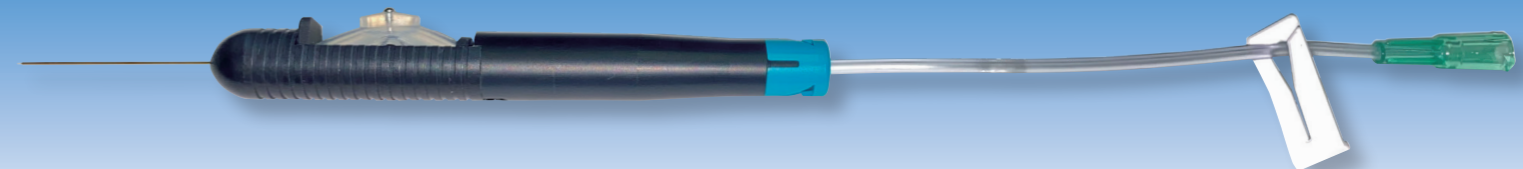

*先端収納バックフラッシュ特徴

ハンドピース内にスプリング機構を採用しました。その為、リザーバー部を上下させるとバネの力で先端シリコンがスライドします。バネの力でシリコンがカニューレ内に押し戻されることがないので、術者は眼内での操作中にリザーバー部を押さえておく必要がありません。

*シャフト全長：25G/33mm,27G/31mm(先端チップ長1mm含む)
*先端チップ材質：ポリウレタン
*ソフトチップ



スプリング機構の動画

製品名：DSP25G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き (VS0270.25)
製品名：DSP27G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き (VS0270.27)
製品名：DSP25G バックフラッシュ先端収納 アスピレーションチュービング付き (VS0275.25)
製品名：DSP27G バックフラッシュ先端収納 アスピレーションチュービング付き (VS0275.27)

数量：5本 /1箱
販売名：Vortex シングルユース網膜硝子体用カニューレ
認証番号：302AKBZX00036000