

JEDMED社

ヘスバーク・バロン氏 真空トレパン

HESSBURG.BARRON VACUUM TREPHINE

この真空トレパンは、すぐれたカッティングをもつ、精巧に研磨されたステンレスブレードです。
ブレードの中心がレシipient角膜の視軸と一致するようにクロスヘアが付いています。
ブレードの切開深度は、一回転毎に0.25mmずつ進むよう精密に設計されています。
表層角膜移植及び全層角膜移植に最適です。



承認番号:20900BZY00983000



| 品番 | サイズ |
|---------|--------|
| 21-8260 | 6.0mm |
| 21-8265 | 6.5mm |
| 21-8270 | 7.0mm |
| 21-8272 | 7.25mm |
| 21-8275 | 7.5mm |
| 21-8277 | 7.75mm |
| 21-8280 | 8.0mm |
| 21-8282 | 8.25mm |
| 21-8285 | 8.5mm |
| 21-8287 | 8.75mm |
| 21-8290 | 9.0mm |



Single-Use

STERILE**JEDMED社**

バロン氏 マーキング ドナー角膜パンチ

BARRON MARKING DONOR PUNCH

この角膜パンチは精巧に研磨されたステンレスブレードです。4本のスチール製のガイドピンとともにナイロンハウジングに埋め込まれ、ガイドピンとカッティングブロックの4隅のガイド穴によって、ドナー角膜とセンタリングされます。
カッティングブロックの窪みには4つの小孔があり、この小孔に、予め付属の滅菌済ペンでマーキングします。ドナー角膜上皮側に転写された4分円点は、レシipient角膜との縫合の目安になります。

| 品番 | サイズ |
|---------|--------|
| 21-8365 | 6.5mm |
| 21-8367 | 6.75mm |
| 21-8370 | 7.0mm |
| 21-8372 | 7.25mm |
| 21-8375 | 7.5mm |
| 21-8377 | 7.75mm |
| 21-8380 | 8.0mm |
| 21-8382 | 8.25mm |
| 21-8385 | 8.5mm |
| 21-8387 | 8.75mm |
| 21-8390 | 9.0mm |
| 21-8395 | 9.5mm |



Single-Use

STERILE

承認番号:20900BZY00984000

製造元

JEDMED

製造販売業者

WHITE MEDICAL株式会社 **ホワイトメディカル**


〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>
E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp

角膜移植用手術器具

監修 東京歯科大学市川総合病院 眼科教授 島崎 潤

HT-3036 縫合撮子 無鉤(チタン製)

ALBERT HEISS

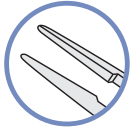

全長:110mm

H-4286 カッチン角膜移植剪刀(左)


ALBERT HEISS



全長:100mm

HT-3111 角膜縫合撮子 前方突出型有鉤0.12mm(チタン製)


ALBERT HEISS

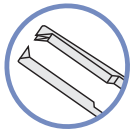

全長:110mm

H-2636/4 角膜(12ラインマーカ)

ALBERT HEISS

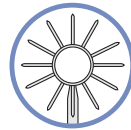

全長:105mm

HT-4579B マイクロ持針器 曲 止なし(チタン製)

ALBERT HEISS



全長:110mm

H-2588 パットンスパツェ

ALBERT HEISS



全長:142mm

H-4302 マイクロ角膜剪刀(直)

ALBERT HEISS



全長:95mm

H-2631 カリパーカストロヴィーホ氏20mm

ALBERT HEISS



H-4312A スプリングハンドル式剪刀 反鋭

ALBERT HEISS



全長:100mm

H-3225/0 ダブル固定リング16×22mm

ALBERT HEISS



H-4285 カッチン角膜移植剪刀(右)

ALBERT HEISS



全長:100mm

許可番号 13B1X00320

製造販売業者



株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>