




Glaucoma Cases,
Simplified™

I/A 付き / デュアルブレードによる線維柱帯の完全切除

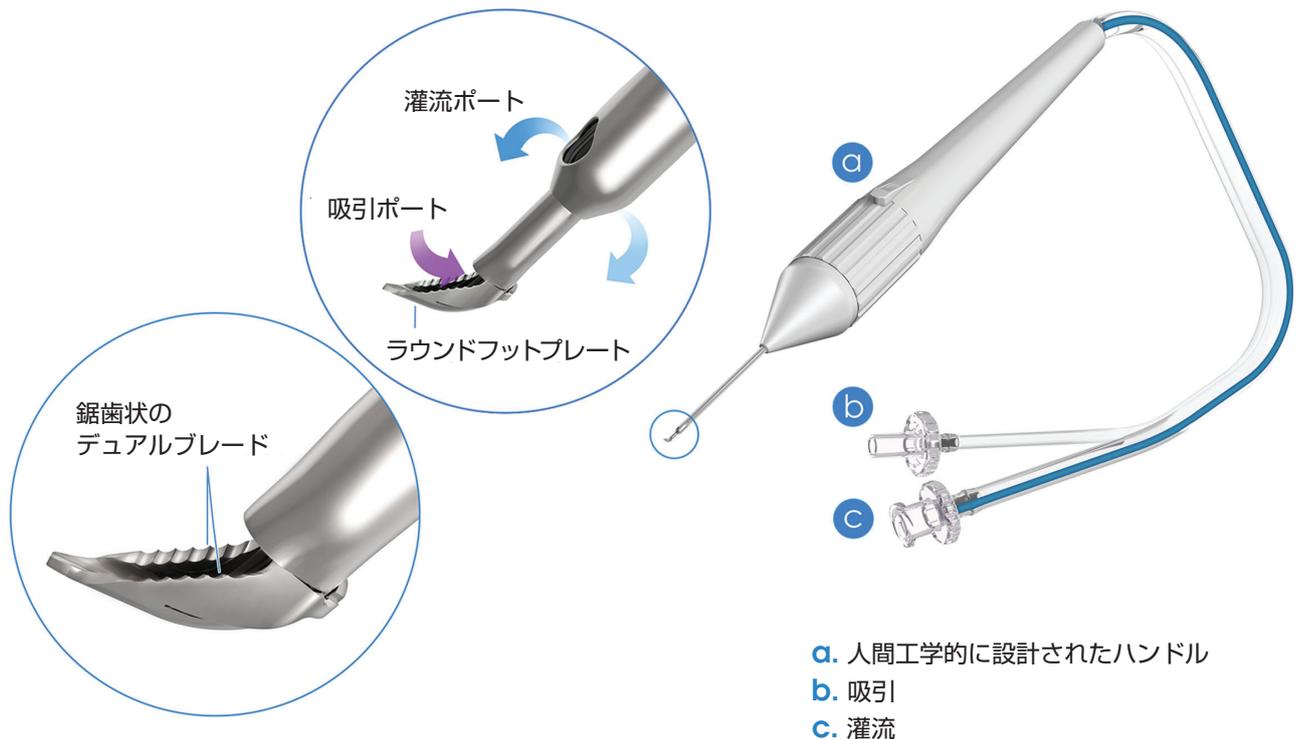

TrabEx+™ Offers:


- ▶ 線維柱帯の完全な切除
- ▶ 解剖学上、最適なデザイン設計
- ▶ 前房の安定性を維持



使用動画


吸引 & 灌流によるサポート

フェイコ I/A との接続

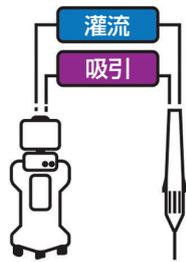


灌流: > 80 cm above patient head
吸引: 10 cc/min vac = 100-150 mmHg

先端ブレードの使用イメージ

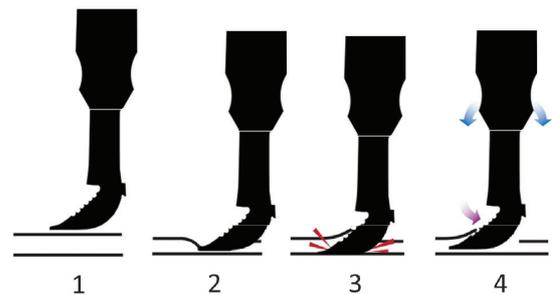

- ▶ TrabEx+™ I/Aは単独での使用及び白内障手術との組み合わせでも使用できます。
- ▶ I/Aは前房をより安定させ、術中の視野を改善します。
- ▶ ラウンドのフットプレートはシュレム管に沿うようにデザインされています。
- ▶ レーザー研磨された鋸歯状のデュアルブレードは、完全に線維柱帯を切除できます。
- ▶ 粘弾性物質は不要です。

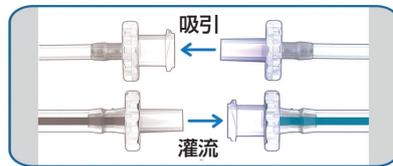


IRR
80+
cm

ASP
10
cc/min

VAC
100
mmHg



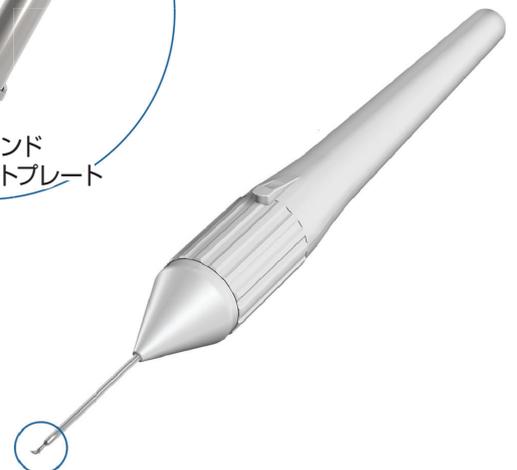

製品番号 600042
入数 1本/1箱(滅菌済み)
製品名 TrabEx™ハンドピース



Glaucoma Cases,
Simplified™