




# SURGILUM®

## ROBO-MARKER G2 MAKES A WORLD OF DIFFERENCE

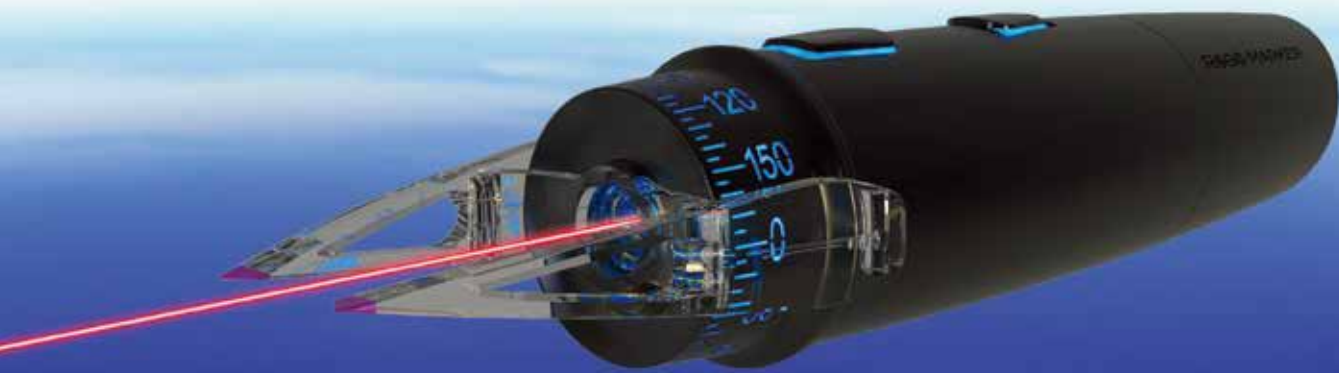

世界初、ハンディタイプにレーザーターゲットが付いたToricマーキング



# ROBO-MARKER G2




- 1つのチップで強膜(12mm) & 角膜(7mm) 上へマーキング可能
- ドライインクの採用、インクは先端チップへ塗布済み
- 先端チップは滅菌済み&単回使用

正確なレーザーアシスト機能




イルミネーション付の軸ダイヤルで乱視軸の設定が容易にできます。

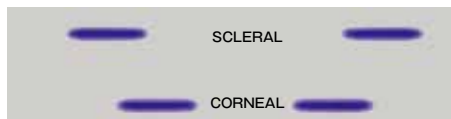

滲まないドライマーキング(最大2時間キープ)




安全なクラス1のレーザーで基準軸、乱視軸を同時に確認できます。

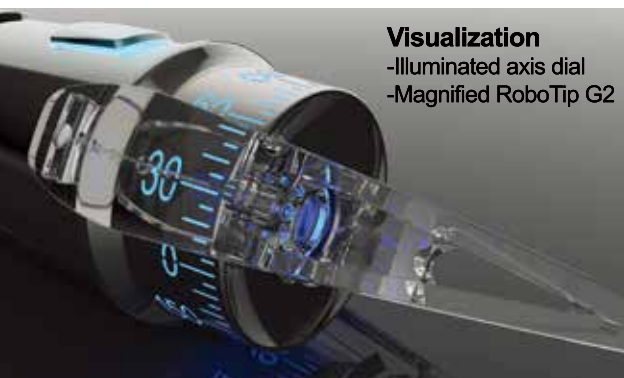

### Visualization

- Illuminated axis dial
- Magnified RoboTip G2

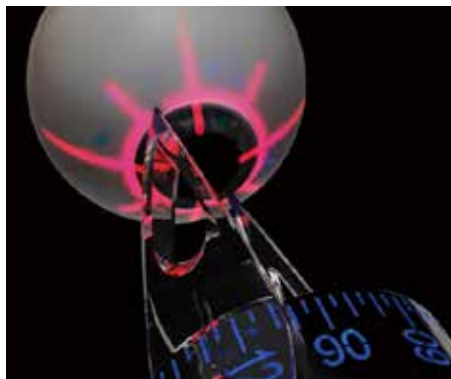

RoboMarker G2は高精度ボールベアリングと振り子式ウェイトを搭載している為、常に自動で水平(0°- 180°)を保つことができます。

品番	製品名
RMSG2SS	RoboMarker G2 ステンレスハンドル
RMSG2BS	RoboMarker G2 マットブラック/シルバーボタン ハンドル(受注販売)
RMSG2B	RoboMarker G2 オールマット ハンドル(受注販売)
TPSG2	Roboチップ G2 (25個/1箱、滅菌済み&単回使用)

注) 受注販売品は、ご注文後のキャンセル・返品は不可

販売名: RoboMarker (ロボマーカ)

医療機器認証番号: 308AKBZX00008000

